


# 巡检设置指引流程

院内需要人员定期检查的工作，可以通过巡检模块记录。

巡检流程主要有**五个环节**：设置检查标准、新增巡检计划、按期生成巡检任务并推送给负责人员、巡检人员执行任务、记录归档。

## 巡检流程

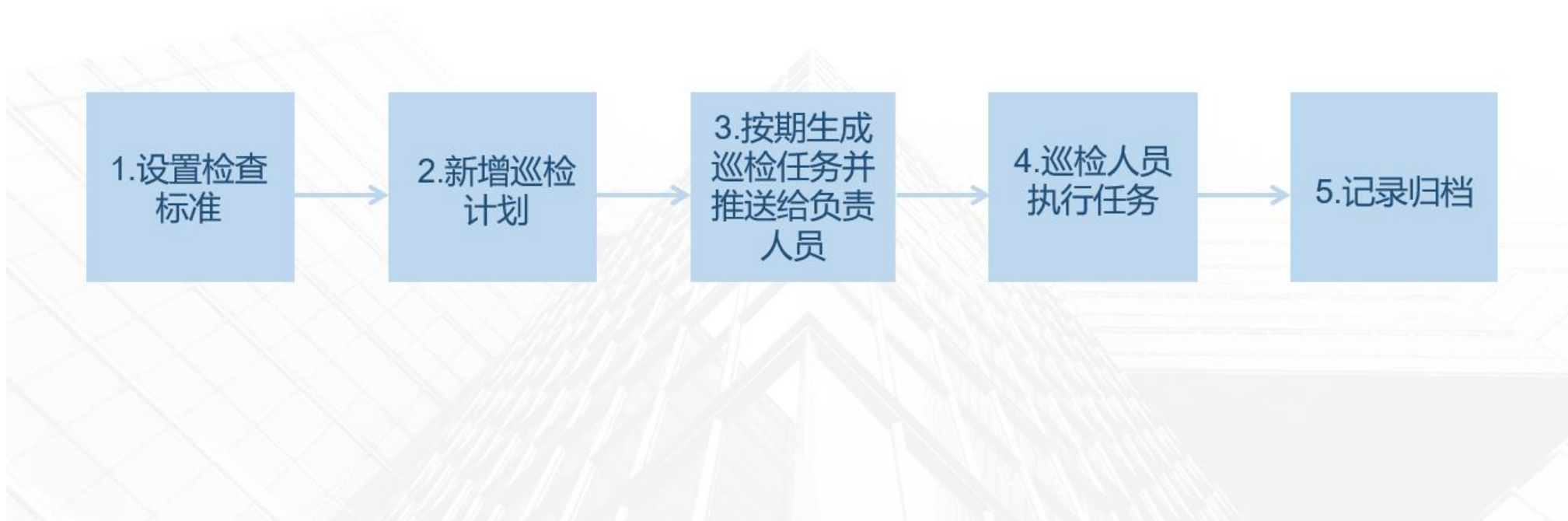

# 一、设置检查标准

## 1. 新增检查标准

### 1). 填写基础信息

在**巡检**的**检查标准**界面中，点击右上角的**新增**，进入检查标准的编辑界面。  
填写**项目名称**、**工具**、**检查目的**、**图片**等信息。

医疗设备管理平台

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 检查标准

检查标准

标准名称或检查目的 查询 设备类型: [v]

3 新增 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	标准名称	设备类型	检查目的	备注	检查项总数
<input type="checkbox"/>	1	编辑	消毒锅			有没合规操作, 有没记录消毒数据	2
<input type="checkbox"/>	2	编辑	压力容器定期检查				19

上一页 1 下一页 10条/页

添加检查标准

基础信息

④

\* 项目名称: 常规检查

设备类型:

工具:

检查目的:

备注:

图片:

## 2). 设置标准详情

基础信息填写完成后，可点击左下角的**添加项目**，录入具体的检查项，填写**项目名称**、**记录方式**、**正常与异常值**、**默认值**、**是否必填**等信息。

标准详情设置完成之后点击**确定**，可根据实际情况添加单个或多个标准，编辑完所有信息后点击页面下方的**保存**，即可完成检查标准的添加。

注：记录方式为单选、多选、数字、文本 4 种；如果有多个选项，选项内容需要使用**英文逗号**隔开。

### 添加检查标准

检查目的: 检查操作环境是否符合标准

备注:

图片:

+  
上传

#### 项目详情

添加项目

序号 操作

检查项

上限

#### 添加项目

×

\* 项目名称: 操作环境检查

记录方式: 多选

正常值和异常值有多个项时以【,】号隔开, 默认为正常和异常

正常值: 符合高级标准,符合一般标准

异常值: 不符合标准,特别不符合标准

默认值:

是否必填:  是  否

取消

确定

## 2. 修改或删除检查标准

如需修改标准，可点击检查标准界面的**编辑**，重新设置信息；

如需删除已添加的标准，则勾选对应的检查标准，点击页面右上方的**批量删除**即可完成删除。

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 检查标准

检查标准

标准名称或检查目的 查询 设备类型: 请选择

新增 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	标准名称	设备类型	检查目的	备注	检查项总数
<input type="checkbox"/>	1	编辑	操作环境检查		检查操作环境是否符合标准		1
<input type="checkbox"/>	2	编辑	常规检查		医院常规性非机械类巡检		1
<input type="checkbox"/>	3	编辑	消毒锅		有没合规操作, 有没记录消毒数据		2
<input type="checkbox"/>	4	编辑	压力容器定期检查				19

修改

上一页 1 下一页 10条/页

## 二、添加巡检计划

### 1. 新增巡检计划

#### 1). 设置基础信息

在**巡检的巡检计划**界面中点击右上角的**新增**，填写**计划名称**、**计划所属科室**、**执行区间**、**循环周期**、**执行开始时间点**、**提醒时间**、**巡检人员**等基础信息。

比如设置计划巡检的执行区间为 2022 年 4 月 21 号至 2022 年 6 月 21 号，循环周期为 1 天，执行开始时间为 10:00，提醒时间为 60 分钟，则系统将会在 2022 年 4 月 21 号开始每天 9:00 提醒指定人员执行巡检任务，并且在 6 月 21 号截止计划。

若首次添加计划的时间为**当天开始**，则**立即生成任务**，否则将在**指定日期的 0 点生成**巡检任务，并在设定的提醒时间提醒指定人员。

执行区间若只填写开始日期，如若没有设置计划截止时间，则该计划将按设置周期持续提醒。

- 维保作业
- 预警计划
- 证照管理
- 备件管理
- 委外业务管理
- 临聘人员管理
- 统计报表
- 不良事件管理
- 巡检**
- 检查标准
- 巡检计划**
- 巡检任务

### 巡检计划

计划编码或计划名称  查询 巡检周期:  状态:  计划所属科室:  巡检人员:  **新增** 启用 停用 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	计划编码	计划名称	计划所属科室	巡检周期	计划巡检时间	巡检人员	计划截止时间
<input type="checkbox"/>	1	<b>编辑</b>	P20220322154911627	消毒锅检查	消毒室	1天	15:00至15:30	王五	
<input type="checkbox"/>	2	<b>编辑</b>	P20220311105804721	消毒锅	检验科	1天	00:00至23:59	王五	

上一页 1 下一页 10条/页

- 设备管理
- 工单管理
- 维保作业
- 预警计划
- 证照管理
- 备件管理
- 委外业务管理
- 临聘人员管理
- 巡检**
- 检查标准
- 巡检计划**
- 巡检任务
- 巡检记录
- 临检预案
- 临检任务
- 临检记录
- 不良事件管理
- 统计报表

### 添加巡检计划

#### 基础信息

\* 计划名称:  \* 计划所属科室:  计划状态:

\* 执行区间:  至  \* 循环周期:   执行开始时间点:

提醒时间(分钟):

在任务开始时间提前N分钟发送通知给巡检人员

设备位置范围:

\* 巡检人员:  **选择人员**

#### 计划明细

**增添巡检设备** **增添巡检点位**

<input type="checkbox"/>	序号	操作	设备编码/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述	巡检标准	必须拍照
<input type="checkbox"/>	1	<b>删除</b>	操作环境检查	器具消毒间	检查器具消毒间的环境、温湿度等是否符合标准	操作环境检查	<input type="checkbox"/> 否



## 2). 添加巡检设备/巡检点位

a. 添加巡检设备：点击**增添巡检设备**，**勾选**对应设备并点击**确定**。

计划明细

增添巡检设备 增添巡检点位

增添巡检设备

请输入关键字 查询

<input type="checkbox"/>	设备名称	唯一码	设备类型	规格型号	所属科室名称
<input type="checkbox"/>	电脑验光仪及角膜曲率	000001		日本/Topcon/KR-800	眼科
<input type="checkbox"/>	手持视力筛查 (电脑验光)	000002		索维/SW-800	眼科
<input type="checkbox"/>	眼科泪道激光治疗仪	000003			眼科
<input type="checkbox"/>	检眼镜	000004		YZ6H	眼科
<input checked="" type="checkbox"/>	裂隙灯	000005		YZ5J	眼科
<input checked="" type="checkbox"/>	眼压计	000006		HUVIT2	眼科
<input type="checkbox"/>	全高清数字化摄像头	000007		Sony/10MD	眼科
<input type="checkbox"/>	眼底观察装置	000008		德国/Zeiss/Resight 700	眼科
<input type="checkbox"/>	母婴监护仪	000009		卓越康达/9000A	妇产科
<input type="checkbox"/>	全数字超声经颅多普勒血流分析仪TCD	000010		瑞华科技	妇产科

上一页 1 2 3 下一页

取消 确定

b. 添加巡检点位：点击**增添巡检点位**，填写**巡检事由**、**点位名称**、**具体描述**等信息。

添加巡检计划

基础信息

\* 计划名称: 操作环境检查

\* 执行区间: 2022-04-21 至

提醒时间(分钟): 60  
在任务开始时间提前N分钟发送通

设备位置范围:

\* 巡检人员: 王五

计划明细

增添巡检设备 增添巡检点位

添加点位

事由: 操作环境检查

\* 点位名称: 器具消毒间

具体描述: 检查器具消毒间的环境、温湿度等是否符合标准

取消 确定

### 3). 选择检查标准

完成巡检设备或点位的添加后，系统会自动弹出检查标准的弹框，**选择**对应的**检查标准**并点击**确定**，即可添加成功。

选择检查标准

请输入关键字

<input type="checkbox"/>	项目名称	设备类型
<input checked="" type="checkbox"/>	操作环境检查	
<input type="checkbox"/>	常规检查	
<input type="checkbox"/>	消毒锅	
<input type="checkbox"/>	压力容器定期检查	

上一页 1 下一页

## 4). 其他设置

若要求巡检人员拍照，可点选右方的“是”（系统默认为“必须拍照”）。

如若增添的巡检设备或点位有误，可点击对应项目的删除，即可删除信息重新设置。

所有信息填写完毕后，点击保存即可成功添加巡检计划。

设备位置范围:

\* 巡检人员: 王五 选择人员

计划明细

增添巡检设备 增添巡检点位

<input type="checkbox"/>	序号	操作	设备编码/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述	巡检标准	必须拍照
<input type="checkbox"/>	1	<span>删除</span>	操作环境检查	器具消毒间	检查器具消毒间的环境、温湿度等是否符合标准	操作环境检查	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
<input checked="" type="checkbox"/>	2	<span>删除</span>	普通检查	001		常规检查	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

保存

# 1. 修改或删除巡检计划

如需修改计划，可点击巡检计划界面的**编辑**，重新设置信息；如需删除已添加的计划，则勾选对应的巡检计划，点击页面右上方的**批量删除**即可完成删除。

医疗设备管理平台

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 巡检计划

删除

计划编码或计划名称 查询 巡检周期: 请选择 状态: 请选择 计划所属科室: 请选择 巡检人员: 请选择

新增 启用 停用 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	计划编码	计划名称	计划所属科室	巡检周期	计划巡检时间	巡检人员	计划截止时间
<input type="checkbox"/>	1	编辑	P20220322154911627	消毒锅检查	消毒室	1天	15:00至15:30	王五	
<input type="checkbox"/>	2	编辑	P20220311105804721	消毒锅	检验科	1天	00:00至23:59	王五	

修改

上一页 1 下一页 10条/页

### 三、巡检任务

#### 1. 执行巡检任务

巡检任务添加成功后，系统会在提醒时间将巡检任务发送给指定巡检人员。巡检人员巡检时，在**巡检的巡检任务**界面中点击对应任务的**执行**，填写**巡检时间**、**巡检人**、**备注**等信息。

点击任务明细的**详细**，选填具体的**巡检时间**和**记录内容**。信息填写完毕后点击确定，页面左下方的整体评价可根据完成情况选择达标、部分整改或者异常。

任务信息填写完成后点击**完成本次巡检任务**即可。

当前位置 > 巡检 > 巡检任务

巡检任务

计划名称 查询 计划所属科室: 请选择 巡检人员: 请选择 计划巡检人员: 请选择 终结 导出Excel 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	状态	任务编号	计划名称	设备巡检进度	计划巡检时间	计划巡检人
<input type="checkbox"/>	1	执行	待执行	XJ20220401000002776	消毒锅检查	未检查(1)	2022-04-01 15:00至2022-04-01 15:30	王五
<input type="checkbox"/>	2	执行	待执行	XJ20220331000003711	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-31 15:00至2022-03-31 15:30	王五
<input type="checkbox"/>	3	执行	待执行	XJ20220330000002440	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-30 15:00至2022-03-30 15:30	王五
<input type="checkbox"/>	4	执行	待执行	XJ20220329000001418	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-29 15:00至2022-03-29 15:30	王五
<input type="checkbox"/>	5	执行	待执行	XJ20220328000001320	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-28 15:00至2022-03-28 15:30	王五
<input type="checkbox"/>	6	执行	待执行	XJ20220327000002815	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-27 15:00至2022-03-27 15:30	王五
<input type="checkbox"/>	7	执行	待执行	XJ20220326000002833	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-26 15:00至2022-03-26 15:30	王五

上一页 1 下一页 10条/页

- 首页
- 设备管理
- 工单管理
- 维保作业
- 预警计划
- 证照管理
- 备件管理
- 委外业务管理
- 临聘人员管理
- 巡检**
- 检查标准
- 巡检计划
- 巡检任务**
- 巡检记录
- 临检预案
- 临检任务
- 临检记录
- 不良事件管理
- 统计报表
- 维保监控大屏

当前位置 > 巡检 > 执行巡检任务

执行巡检任务

基础信息

计划名称: 操作环境检查 \* 巡检开始时间: 请选择日期 \* 巡检结束时间: 请选择日期

巡检人: 超级管理员 选择人员

备注:

任务明细

序号	操作	巡检项目	合计项	漏检数	异常数	设备编号/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述
1	<b>详细</b>	操作环境检查	1	1	0	操作环境检查	器具消毒间	检查器具消毒间的环境、温湿度等是否符合标准

整体评价: 达标 部分整改 异常

完成本次巡检任务

巡检结果

\* 开始时间: 2022-04-21 16:09:13 \* 结束时间: 2022-04-21 16:09:18

序号	项目名称	上限	下限	记录内容	检查结果	备注
1	操作环境检查			<input type="checkbox"/> 符合高级标准 <input type="checkbox"/> 符合一般标准 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合标准 <input type="checkbox"/> 特别不符合标准	<input type="radio"/> 正常 <input checked="" type="radio"/> 异常	

取消 确定

## 2. 其他操作

### 1). 终结任务

适合出现**当前巡检任务无法按期执行**、且该对应的巡检计划后续任务将照常进行的情况。

如需终结任务，则在巡检任务界面**勾选**对应的任务，点击右上角的**终结**，填写**终结原因**并点击**确定**，即可终结任务。

注：终结只针对该次任务，不影响后续周期生成的任务。

The screenshot displays the '巡检任务' (Inspection Task) management interface. At the top, there are search filters for '计划名称' (Plan Name), '计划所属科室' (Plan Department), '巡检人员' (Inspector), and '计划巡检人员' (Plan Inspector). On the right, there are buttons for '终结' (End), '导出Excel' (Export Excel), and '批量删除' (Batch Delete). The main area contains a table with columns: '序号' (Serial Number), '操作' (Action), '状态' (Status), '任务编号' (Task ID), '计划名称' (Plan Name), '设备巡检进度' (Equipment Inspection Progress), '计划巡检时间' (Plan Inspection Time), and '计划巡检人' (Plan Inspector). A dialog box titled '终结' (End) is open, showing a text input field for '\* 终结原因:' (Reason for ending) and buttons for '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm). Red annotations highlight the '终结' button in the top right, the checkboxes for tasks 1 and 2, the '终结' dialog title, the '终结原因' input field, and the '确定' button.

序号	操作	状态	任务编号	计划名称	设备巡检进度	计划巡检时间	计划巡检人
1	执行	待执行	XJ20220326000002833	消毒锅检查	未检查(1)	2022-04-01 15:00至2022-04-01 15:30	王五
2	执行	待执行	XJ20220327000002815	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-31 15:00至2022-03-31 15:30	王五
3	执行	待执行	XJ20220328000002815	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-30 15:00至2022-03-30 15:30	王五
4	执行	待执行	XJ20220329000002815	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-29 15:00至2022-03-29 15:30	王五
5	执行	待执行	XJ20220328000002833	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-28 15:00至2022-03-28 15:30	王五
6	执行	待执行	XJ20220327000002815	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-27 15:00至2022-03-27 15:30	王五
7	执行	待执行	XJ20220326000002833	消毒锅检查	未检查(1)	2022-03-26 15:00至2022-03-26 15:30	王五



## 2). 删除任务

若巡检计划设置有误，产生了**存在问题的巡检任务**，即应删除任务，同时修改或删除对应的巡检计划。一般适用于首次添加计划并立即生成了当天任务、需要将当天任务删除的情况。

如需**删除**巡检任务，则在巡检任务界面**勾选**对应的任务，点击页面右上方的**批量删除**即可完成删除。

注：删除只针对该次任务，不影响后续周期生成的任务。

广州医疗机构 消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 巡检任务

巡检任务

计划名称  查询 计划所属科室:  请选择 计划巡检人员:  请选择 ① 终结 导出Excel **批量删除**

<input type="checkbox"/>	序号	操作	状态	任务编号	计划名称	设备巡检进度	计划开始时间	计划巡检人	计划所属科室	巡检人	巡检
<input type="checkbox"/>	1	执行	未开始	XJ20220422000000244	非机械类巡检	未检查(1)	2022-04-22 00:00	王五	急诊科		
<input type="checkbox"/>	2	执行	未开始	XJ20220422000000625	操作环境检查	未检查(1)	2022-04-22 00:00	王五	急诊科		
<input type="checkbox"/>	3	执行	未开始	XJ20220422000000215	消毒锅检查	未检查(1)	2022-04-22 15:00	王五	消毒室		
<input type="checkbox"/>	4	执行	未开始	XJ20220421142351966	非机械类巡检	未检查(1)	2022-04-21 00:00	王五	急诊科		
<input type="checkbox"/>	5	执行	待执行	XJ20220421000010143	消毒锅检查	未检查(1)	2022-04-21 15:00	王五	消毒室		

上一页 1 下一页 10条/页

## 四、记录归档

在**巡检记录**中可以查看已完成的巡检任务，点击对应任务的**详情**即可查看该任务的详细信息。

巡检报告支持 Excel 和 PDF 形式导出，可点击页面下方对应的**按钮**导出。

注：设备巡检进度“未检查（0）”表示该任务的所有检查项目均已检查完毕，无未检查项目。



当前位置 > 巡检 > 巡检记录

巡检记录

设备/点位名称 查询 计划名称: 请选择 巡检人员: 请选择

<input type="checkbox"/>	序号	操作	整体评价	任务编号	计划名称	设备巡检进度	计划巡检开始时间	计划巡检人	计划所属科室	巡检人
<input type="checkbox"/>	1	详情	达标	XJ20220421160429970	操作环境检查	未检查(0)	2022-04-21 00:00	王五	急诊科	王五
<input type="checkbox"/>	2	详情	达标	XJ20220322154911400	消毒锅检查	未检查(0)	2022-03-22 15:00	王五	消毒室	

上一页 1 下一页 10条/页

- 首页
- 设备管理
- 工单管理
- 维保作业
- 预警计划
- 证照管理
- 备件管理
- 委外业务管理
- 临聘人员管理
- 巡检**
  - 检查标准
  - 巡检计划
  - 巡检任务
  - 巡检记录**
  - 临检预案
  - 临检任务
  - 临检记录
- 不良事件管理
- 统计报表
- 维保监控大屏

当前位置 > 巡检 > 巡检记录详情

任务详情

基础信息

计划名称: 操作环境检查

计划开始时间: 2022/04/21 00:00:00

巡检人: 王五

实际开始时间: 2022/04/21 16:35:10

实际结束时间: 2022/04/21 16:38:04

备注:

任务明细

序号	操作	巡检项目	合计项	漏检数	异常数	设备编号/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述
1	<a href="#">详细</a>	操作环境检查	1	0	0	操作环境检查	器具消毒间	检查器具消毒间的环境、温湿度等是否符合标准

整体评价: 达标

导出巡检报告Excel

导出巡检报告PDF

