

临检设置指引流程

院内**临时、非周期性的检查**工作，可以通过**临检模块**记录。

临检流程主要有**五个环节**：设置检查标准、新增临检计划、手动生成临检任务、临检人员执行任务、记录归档。

临检流程

院内有需要**临时、非周期性检查**的工作，可以通过临检模块记录。



一、设置检查标准

1. 新增检查标准

1) 填写基础信息

在**巡检**的**检查标准**界面中，点击右上角的**新增**，进入检查标准的编辑界面。
填写**项目名称**、**工具**、**检查目的**、**图片**等信息。

医疗设备管理平台

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 检查标准

检查标准

标准名称或检查目的 查询 设备类型: [v]

③ 新增 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	标准名称	设备类型	检查目的	备注	检查项总数
<input type="checkbox"/>	1	编辑	消毒锅			有没合规操作, 有没记录消毒数据	2
<input type="checkbox"/>	2	编辑	压力容器定期检查				19

上一页 1 下一页 10条/页

巡检 ①

检查标准 ②

添加检查标准

基础信息

④

* 项目名称: 常规检查

设备类型:

工具:

检查目的:

备注:

图片:

2) 设置标准详情

基础信息填写完成后，可点击左下角的**添加项目**，录入具体的检查项，填写**项目名称**、**记录方式**、**正常与异常值**、**默认值**、**是否必填**等信息。

标准详情设置完成之后点击**确定**，可根据实际情况添加单个或多个标准，编辑完所有信息后点击页面下方的**保存**，即可完成检查标准的添加。

注：记录方式为单选、多选、数字、文本 4 种；如果有**多个选项**，选项内容需要使用**英文逗号**隔开。



The screenshot shows a web interface for adding a check standard. A modal dialog box titled '添加项目' (Add Item) is open, allowing the user to configure a specific item. The background interface shows the '添加检查标准' (Add Check Standard) page with fields for '检查目的' (Check Purpose), '备注' (Remarks), and '图片' (Image). The '添加项目' dialog box contains the following fields and options:

- 项目名称:** 操作环境检查
- 记录方式:** 多选 (with a dropdown arrow)
- 正常值:** 符合高级标准,符合一般标准
- 异常值:** 不符合标准,特别不符合标准
- 默认值:** (empty field)
- 是否必填:** 是 否

At the bottom of the dialog box, there are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons. A red arrow points from the '添加项目' button in the background interface to the dialog box.

2. 修改或删除检查标准

如需修改标准，可点击检查标准界面的**编辑**，重新设置信息；

如需删除已添加的标准，则勾选对应的检查标准，点击页面右上方的**批量删除**即可完成删除。

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 检查标准

检查标准

标准名称或检查目的 查询 设备类型: 请选择

新增 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	标准名称	设备类型	检查目的	备注	检查项总数
<input type="checkbox"/>	1	编辑	操作环境检查		检查操作环境是否符合标准		1
<input type="checkbox"/>	2	编辑	常规检查		医院常规性非机械类巡检		1
<input type="checkbox"/>	3	编辑	消毒锅		有没合规操作, 有没记录消毒数据		2
<input type="checkbox"/>	4	编辑	压力容器定期检查				19

修改

删除

上一页 1 下一页 10条/页

二、设置临检预案

1. 新增临检预案

1) 增添临检设备或点位

在**巡检**的**临检预案**界面中点击右上角的**添加**，进入界面后选择增添临检设备或临检点位。

临检计划

设备编号/事由或设备/点位名称 查询 上次临检时间: 开始日期 ~ 结束日期

添加 已生成任务 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	设备编号/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述	临检项	上次临检时间
<input type="checkbox"/>	1	修改 生成任务	000003	眼科泪道激光治疗仪		常规检查	
<input type="checkbox"/>	2	修改 生成任务	000003	眼科泪道激光治疗仪		消毒锅	
<input type="checkbox"/>	3	修改 生成任务	测试	001	222	常规检查	

上一页 1 下一页 10条/页

添加临检计划

临检设备

增添临检设备 增添临检点位

a. 添加临检设备：点击**增添临检设备**，**勾选**对应设备并点击**确定**。

增添临检设备

请输入关键字

<input type="checkbox"/>	设备名称	唯一码	设备类型	规格型号	所属科室名称
<input type="checkbox"/>	电脑验光仪及角膜曲率	000001		日本/Topcon/KR-800	眼科
<input type="checkbox"/>	手持视力筛查 (电脑验光)	000002		索维/SW-800	眼科
<input type="checkbox"/>	眼科泪道激光治疗仪	000003			眼科
<input type="checkbox"/>	检眼镜	000004		YZ6H	眼科
<input type="checkbox"/>	裂隙灯	000005		YZ5J	眼科
<input type="checkbox"/>	眼压计	000006		HUVIT2	眼科
<input type="checkbox"/>	全高清数字化摄像头	000007		Sony/10MD	眼科
<input type="checkbox"/>	眼底观察装置	000008		德国/Zeiss/Resight 700	眼科
<input type="checkbox"/>	母婴监护仪	000009		卓越康达/9000A	妇产科
<input checked="" type="checkbox"/>	全数字超声经颅多普勒血流分析仪TCD	000010		瑞华科技	妇产科

上一页 1 2 3 下一页

b. 添加临检点位：点击**增添临检点位**，填写**临检事由**、**点位名称**、**具体描述**等信息。

设备编号/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述
添加点位 ×		
事由:	<input type="text" value="临时检查_环境"/>	
* 点位名称:	<input type="text" value="001_急诊大楼"/>	
具体描述:	<input type="text" value="检查环境是否符合标准"/>	
<input type="button" value="取消"/>		<input type="button" value="确定"/>

2) 选择检查标准

临检设备或点位添加完成并点击**确定**后，系统会自动弹出检查标准设置的弹框，**勾选**对应的检查标准并点击**确定**。

选择检查标准

请输入关键字

<input type="checkbox"/>	项目名称	设备类型
<input checked="" type="checkbox"/>	操作环境检查	
<input type="checkbox"/>	常规检查	
<input type="checkbox"/>	消毒锅	
<input type="checkbox"/>	压力容器定期检查	

上一页 1 下一页

3) 选择人员

选择好检查标准并点击**确定**按钮后，系统会自动弹出人员选择的弹框，**勾选**对应的临检人员，**点击确定**即可。

	姓名	手机	岗位权限	科室
<input type="radio"/>	超级管理员		超级管理员	
<input type="radio"/>	张三		普通用户	
<input type="radio"/>	李四		机构管理者	
<input type="radio"/>	王五		内部维修人员	
<input type="radio"/>	刘六		设备管理员	

上一页 1 下一页

取消 确定

4) 删除和保存

若在新增临检预案时信息有误，可点击界面的**删除**按钮进行删除。

设置好临检计划后，点击页面下方的**保存**，即可完成临检预案的添加。

医疗设备管理平台

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 添加临检计划

添加临检计划

临检设备

增添临检设备 增添临检点位

序号	操作	设备编号/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述	操作人	巡检项目	必须拍照
1	删除	临检	001	环境检查	王五	操作环境检查	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

保存

5) 其他设置

如已设置好的临检预案需要修改，可点击临检预案界面的修改；如需删除预案，可勾选对应的预案，点击右上方的批量删除，即可删除预案。

医疗设备管理平台

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 临检预案

临检计划

设备编号/事由或设备/点位名称 查询 上次临检时间: 开始日期 ~ 结束日期

添加 已生成任务 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	设备编号/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述	临检项	上次临检时间
<input type="checkbox"/>	1	修改 生成任务	临时检查_环境	001_急诊大楼	检查环境是否符合标准	操作环境检查	
<input type="checkbox"/>	2	修改 生成任务	000003	眼科泪道激光治疗仪		常规检查	
<input type="checkbox"/>	3	修改 生成任务	000003	眼科泪道激光治疗仪		消毒锅	
<input type="checkbox"/>	4	修改 生成任务	测试	001	222	常规检查	

上一页 1 下一页 10条/页

修改

×

设备编号/事由:

临时检查_环境

设备/点位名称:

001_急诊大楼

规格型号/具体描述:

检查环境是否符合标准

必须拍照: 是 否

操作人员:

王五

选择人员

临检项目:

操作环境检查

选择标准

取消

确定

三、生成临检任务并推送给指定人员

1. 生成临检任务

在临检预案界面点击对应预案的**生成任务**按钮，填写**计划临检日期**、**开始时间**和**临检人员**，点击**确定**即可生成任务。临检任务可以依需多次生成。

序号	操作	设备编号/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述	临检项	上次临检时间
1	修改 生成任务	临时检查_环境	001_急诊大楼	检查环境是否符合标准	操作环境检查	
2	修改 生成任务	000003	眼科泪道激光治疗仪		常规检查	
3	修改 生成任务	000003	眼科泪道激光治疗仪		消毒锅	
4	修改 生成任务	测试	001	222	常规检查	

生成临检任务

* 计划临检日期: 请选择日期


* 开始时间: 09:00

* 临检人员: 选择人员

取消 确定

2. 查看已生成的临检任务

点击**临检任务**或点击**临检预案**界面右上角的**已生成任务**皆可查看已生成的临检任务。

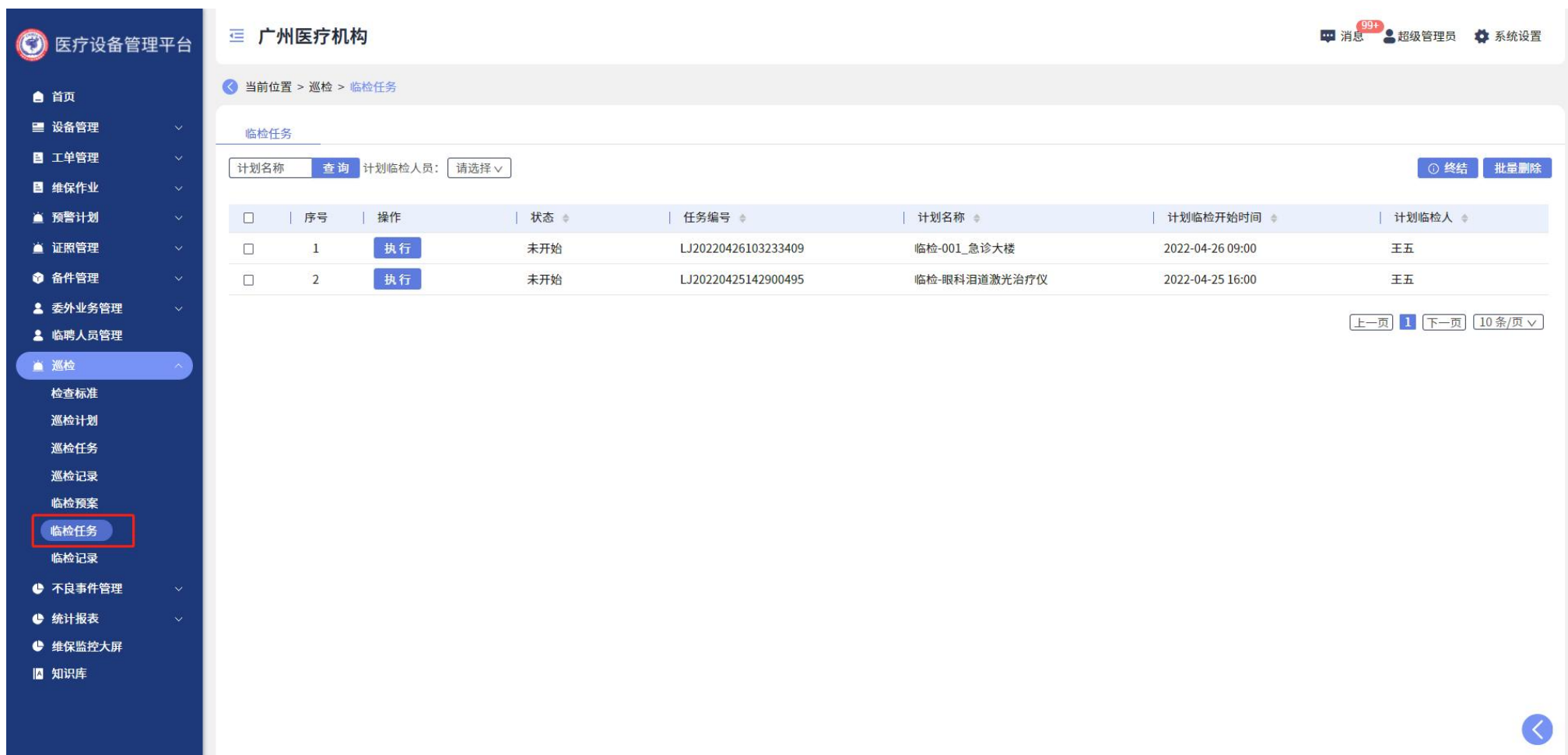

医疗设备管理平台 广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 临检任务

临检任务

计划名称 查询 计划临检人员: 请选择

结束 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	状态	任务编号	计划名称	计划临检开始时间	计划临检人
<input type="checkbox"/>	1	执行	未开始	LJ20220426103233409	临检-001_急诊大楼	2022-04-26 09:00	王五
<input type="checkbox"/>	2	执行	未开始	LJ20220425142900495	临检-眼科泪道激光治疗仪	2022-04-25 16:00	王五

上一页 1 下一页 10条/页

- 首页
- 设备管理
- 工单管理
- 维保作业
- 预警计划
- 证照管理
- 备件管理
- 委外业务管理
- 临聘人员管理
- 巡检
 - 检查标准
 - 巡检计划
 - 巡检任务
 - 巡检记录
 - 临检预案
 - 临检任务
 - 临检记录
- 不良事件管理
- 统计报表
- 维保监控大屏
- 知识库

当前位置 > 巡检 > 临检预案

临检计划

设备编号/事由或设备/点位名称 查询 上次临检时间: 开始日期 ~ 结束日期

添加 已生成任务 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	设备编号/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述	临检项	上次临检时间
<input type="checkbox"/>	1	修改 生成任务	临时检查_环境	001_急诊大楼	检查环境是否符合标准	操作环境检查	
<input type="checkbox"/>	2	修改 生成任务	000003	眼科泪道激光治疗仪		常规检查	
<input type="checkbox"/>	3	修改 生成任务	000003	眼科泪道激光治疗仪		消毒锅	
<input type="checkbox"/>	4	修改 生成任务	测试	001	222	常规检查	

上一页 1 下一页 10条/页



四、临检任务

1. 执行临检任务

临检任务添加成功后，系统会自动将任务推送给指定临检人员。临检人员工作时，在**巡检的临检任务**界面中点击对应任务的**执行**，填写**临检起始时间**、**临检人**、**备注**、**图片**等信息。

填写对应项目的**记录内容**和**检查结果**，页面左下方的**整体评价**可根据完成情况选择达标、部分整改或者异常。

任务信息填写完成后点击**完成本次临检任务**即可。

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 临检任务

临检任务

计划名称 查询 计划临检人员: 请选择

终结 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	状态	任务编号	计划名称	计划临检开始时间	计划临检人
<input type="checkbox"/>	1	执行	未开始	LJ20220426103233409	临检-001_急诊大楼	2022-04-26 09:00	王五
<input type="checkbox"/>	2	执行	未开始	LJ20220425142900495	临检-眼科泪道激光治疗仪	2022-04-25 16:00	王五

上一页 1 下一页 10条/页

- 首页
- 设备管理
- 工单管理
- 维保作业
- 预警计划
- 证照管理
- 备件管理
- 委外业务管理
- 临聘人员管理
- 巡检**
 - 检查标准
 - 巡检计划
 - 巡检任务
 - 巡检记录
 - 临检预案
 - 临检任务**
 - 临检记录
- 不良事件管理
- 统计报表
- 维保监控大屏
- 知识库

当前位置 > 巡检 > 执行临检任务

临检任务

设备/点位编号: 临时检查_环境 设备/点位名称: 001_急诊大楼 *临检开始时间: 请选择日期

*临检结束时间: 请选择日期 临检人: 超级管理员

备注:

图片: + 上传

序号	项目名称	上限	下限	记录内容	检查结果	备注
1	操作环境检查			<input type="checkbox"/> 符合高级标准 <input checked="" type="checkbox"/> 符合一般标准 <input type="checkbox"/> 不符合标准 <input type="checkbox"/> 特别不符合标准	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常	

整体评价:

- 达标
- 部分整改
- 异常

完成本次临检任务



2. 其他操作

1) 终结任务

适合出现**当前临检任务无法按期执行**的情况。

如需终结任务，则在临检任务界面**勾选**对应的任务，点击右上角的**终结**，填写**终结原因**并点击**确定**，即可终结任务。

当前位置 > 巡检 > 临检任务

临检任务

计划名称 查询 计划临检人员: 请选择 v

① 终结 批量删除

<input type="checkbox"/>	序号	操作	状态	任务编号	计划名称	计划临检开始时间	计划临检人
<input checked="" type="checkbox"/>	1	执行	未开始	LJ20220426103233409	临检-001_急诊大楼	2022-04-26 09:00	王五
<input type="checkbox"/>	2	执行	未开始	LJ20220425142900495	临检-眼科泪道激光治疗仪	2022-04-25 16:00	王五

上一页 1 下一页 10条/页 v

终结

* 终结原因:

取消 确定

2) 删除任务

若临检计划有变更，生成了**存在问题的临检任务**，即应删除任务。

如需**删除**临检任务，则在临检任务界面**勾选**对应的任务，点击页面右上方的**批量删除**即可完成删除。

医疗设备管理平台

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 临检任务

临检任务

计划名称 查询 计划临检人员: 请选择

终结 批量删除

序号	操作	状态	任务编号	计划名称	计划临检开始时间	计划临检人
1	执行	未开始	LJ20220426103233409	临检-001_急诊大楼	2022-04-26 09:00	王五
2	执行	未开始	LJ20220425142900495	临检-眼科泪道激光治疗仪	2022-04-25 16:00	王五

上一页 1 下一页 10条/页

五、记录归档

在**临检记录**中可以查看已完成的临检任务，点击对应任务的**详情**即可查看该任务的详细信息。

临检报告支持 Excel 和 PDF 形式导出，可点击页面下方对应的**按钮**导出。

广州医疗机构

消息 99+ 超级管理员 系统设置

当前位置 > 巡检 > 临检记录

临检记录

设备编号/事由或设备/点位名称 查询 临检人: 请选择 临检时间: 开始日期 ~ 结束日期

<input type="checkbox"/>	序号	操作	设备编号/事由	设备/点位名称	规格型号/具体描述	临检开始时间	整体评价	临检人	项目总数	漏检项	异常项	是否终结
<input type="checkbox"/>	1	详情	临时检查_环境	001_急诊大楼	检查环境是否符合标准	2022-04-26 10:46:43	达标	王五	1	0	0	
<input type="checkbox"/>	2	详情	000003	眼科泪道激光治疗仪		2022-04-25 14:36:25	达标	WAGNWU	2	0	0	

上一页 1 下一页 10条/页

- 首页
- 设备管理
- 工单管理
- 维保作业
- 预警计划
- 证照管理
- 备件管理
- 委外业务管理
- 临聘人员管理
- 巡检**
- 检查标准
- 巡检计划
- 巡检任务
- 巡检记录
- 临检预案
- 临检任务
- 临检记录
- 不良事件管理
- 统计报表
- 维保监控大屏
- 知识库

当前位置 > 巡检 > 临检记录详情

临检记录

设备/点位编号: 临时检查_环境

计划开始时间: 2022/04/26 09:00:00

设备/点位名称: 001_急诊大楼

实际开始时间: 2022/04/26 10:46:43

实际结束时间: 2022/04/26 10:46:45

临检人: 超级管理员

备注:

现场图片:

整体评价: 达标

序号	标准名称	上限	下限	记录内容	检查结果	备注
1	操作环境检查			符合一般标准	正常	

导出临检报告Excel

导出临检报告PDF

